

# Podłączanie urządzenia do aplikacji

## Krok 1

Przejdź do Ustawień w telefonie.  
Przewiń w dół i wybierz aplikację „Therabody”.


## Krok 2

**(dla użytkowników systemu iOS)**


Upewnij się, że dostęp Bluetooth jest włączony dla aplikacji Therabody.

**(dla użytkowników systemu Android)**


Upewnij się, że dostęp do lokalizacji jest włączony dla aplikacji.

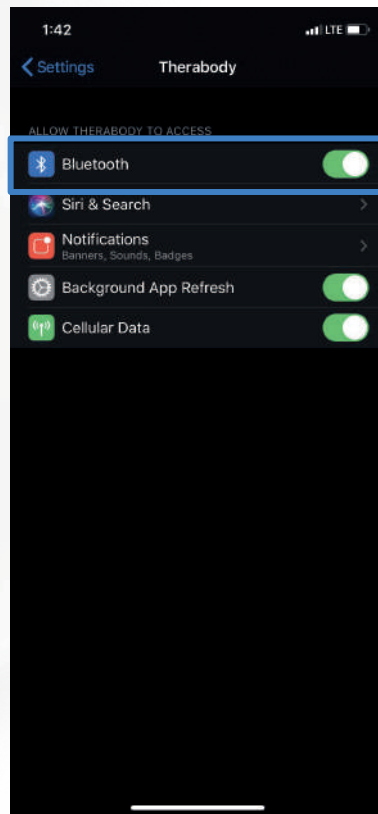

iOS

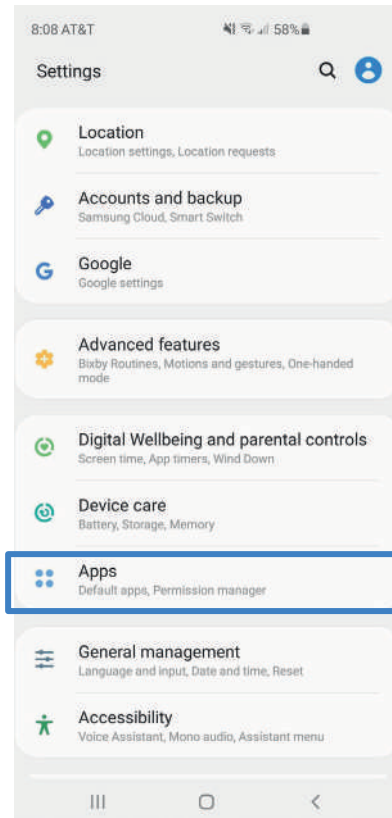

Android

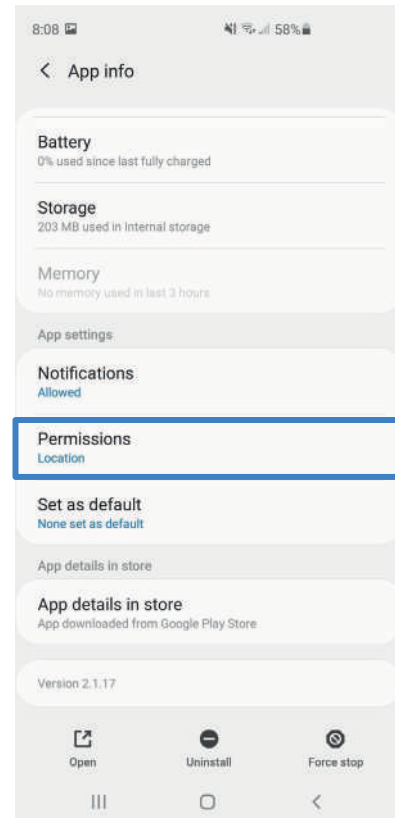

# Podłączanie urządzenia do aplikacji



## Krok 3

W menu „For You” – kliknij ikonę profilu w lewym górnym rogu.

## Krok 4

Kliknij „Theragun Devices”

Tutaj będziesz mógł dodać nowe urządzenia Theragun, a także zobaczyć wcześniej zapisane urządzenia.

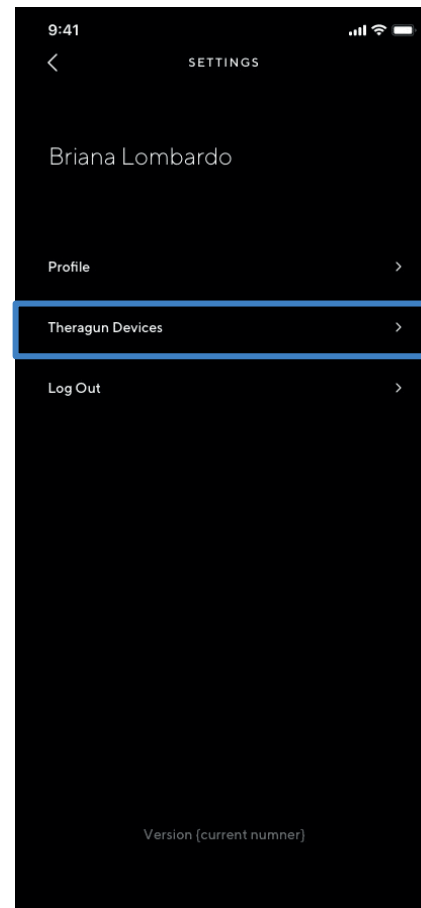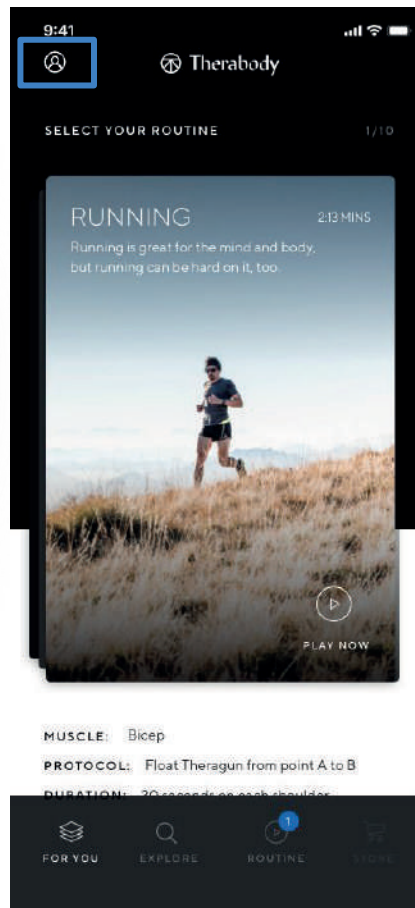

# Podłączanie urządzenia do aplikacji

## Krok 5

Kliknij „Dodaj urządzenie”, aby zapisać nowe urządzenie w swoim profilu.

## Krok 6

Naciśnij szybko przycisk zasilania na urządzeniu Theragun (aktywacja ekranu LED).

## Krok 7

Po podłączeniu, zobaczysz swój Theragun w „Dostępnych urządzeniach”.  
Kliknij żądane urządzenie Theragun, które chcesz podłączyć.

Jeśli nie widzisz swojego urządzenia Theragun, upewnij się, że jest włączone.

